

ساخت ایران

رگولاتور ساکشن دیواری

Vacuum Regulator


TS-1000



رگولاتور ساکشن دیواری (وکیوم سانترال) TS-1000

تولید شده به وسیله متخصصین ایرانی با بهره‌گیری از
تکنولوژی TM فرانسه و با کیفیت‌ترین مواد اولیه

ویژگی‌ها:

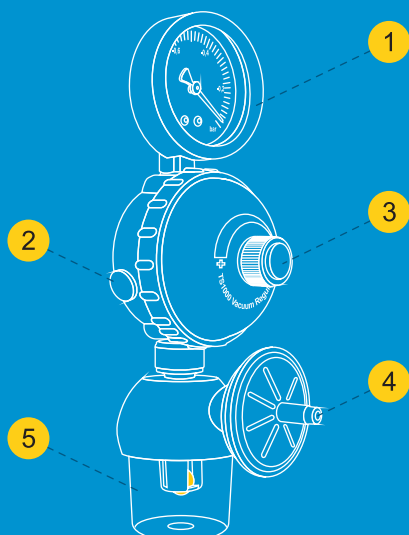

① دارای گیج با دقت بالا و مجهز به ضربه‌گیر لاستیکی

② مجهز به کلید ON/OFF جهت قطع و وصل سریع وکیوم

③ امکان تنظیم میزان وکیوم از صفر تا میزان حداکثر فقط با ۲/۵ دور چرخش ولوم

④ دارای فیلتر آنتی‌باکتریال به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی

⑤ دارای مخزن اطمینان مجهز به قطع‌کن جهت جلوگیری از ورود مایع به داخل رگولاتور



مخزن ساکشن



فیلتر آنتی باکتریال



مخزن قطع کن



کانکتور Y شکل

رگولاتور ساکشن با خروجی شلنگ خور مدل TS-1000 (ECO)

- + دارای گیج با دقت بالا همراه با کاور ضربه گیر
- + مجهز به کلید on/off جهت قطع و وصل سریع و کیوم
- + دارای فیلتر آنتی باکتریال به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی



رگولاتور ساکشن ترالی دار مدل TS-1000 (Trolley)

- + دارای ترالی با چرخ های روان و آنتی استاتیک
- + بدنه ترالی از جنس استیل ضد زنگ
- + امکان سفارش با ترکیب بندی متفاوت:
- + رگولاتور تکی یا دوقلو
- + مخزن ۲ لیتری یا ۴ لیتری (۱ عدد یا ۲ عدد)



تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان دستگردی (ظفر)، خیابان ناجی
کدپستی: ۱۹۱۸۷۶۳۸۱۱
خیابان فرزانه شرقی، پلاک ۱۴
تلفن: ۰۲۱ ۲۲۲۲۲۱۵۰ خط ویژه

طراح تجهیز پویش
تولید و واردات تجهیزات پزشکی

